

Колоноскопы FC, EC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-600WL



Эндоскопы серии 600 с CMOS матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность диагностики. С системой смыва.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1690
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,0
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530DM



Терапевтический видеоколоноскоп EC-530DM с рабочей длиной 1330 мм для проведения разнообразных диагностических и операционных манипуляций. Расширенный угол зрения и увеличенная до 100 мм глубина резкости позволяют проводить сложнейшие эндоскопические внутрипросветные процедуры: мукозэктомию, туморэктомию, полипэктомию, резекцию слизистой и пр.

Устройство оснащено двумя инструментальными каналами для эффективной аспирации и использования 2-х инструментов одновременно. Уникальная разработка Fujifilm – технология смыва Water Jet – обеспечивает прекрасную видимость участка оперирования.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	13,2
Диаметр рабочего канала, мм	2,8 / 3,8
Рабочая длина, мм	1700
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530MP



Видеоколоноскоп EC-530MP с рабочей длиной в 1330 мм оснащён тонким вводимым концом толщиной 11.0 мм, благодаря чему может применяться в том числе и в педиатрии. Эндоскоп отличается удобным введением и отличной маневренностью. Модель имеет канал для инструментов диаметром 3.2 мм, форсунки для подачи воздуха и воды, большие углы изгиба.

Идеальное соотношение инструментального канала и радиуса вводимого зонда дает

возможность применять ЕС-530MP в проктологии для удаления непроходимости, проведения полипэктомии и туморэктомии, коагуляции кровотечений и других микроопераций.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	11,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1330(MP) / 1690(LP)
Общая длина, мм	1630(MP) / 1990(LP)
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,1
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530WL3



Видеоколоноскоп EC-530WL3 с рабочей длиной 1690 мм, высоким оптическим разрешением – прекрасный образец универсальной модели для безопасных и эффективных эндоскопических исследований. Все стандартные операции на толстом кишечнике – туморэктомия, коагуляция кровотечений, полипэктомия, устранение непроходимости – осуществляются с помощью этого

эндоскопа.

Модель имеет широкий инструментальный канал, большие углы изгиба, ребристую поверхность для предотвращения соскальзывания, что значительно облегчает управление и создает комфорт для пациентов при продолжительных процедурах. Благодаря технологии постепенного изменения жесткости ColoAssist эндоскоп вводится практически беспрепятственно, исключая нежелательное растяжение кишечника.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1690
Общая длина, мм	1990
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530WI3



Видеоколоноскоп EC-530WI3 с длиной гибкой части 1520 мм и улучшенным оптическим разрешением обеспечивает безопасное и эффективное проведение эндоскопических исследований. Зонд оборудован широким инструментальным каналом, который обеспечивает применение полного спектра приспособлений для колоноскопических манипуляций. Это

значительно увеличивает диапазон возможных эндоскопических процедур, что позволяет отнести модель к категории универсальных.

ЕС-530WI3 имеет ребристую поверхность и градуированную жесткость благодаря технологии ColoAssist, которая обеспечивает легкость в управлении и безболезненное для пациента введение дистального конца.


Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330(WM3) / 1520(WI3) / 1690(WL3)
Общая длина, мм	1630(WM3) / 1820(WI3) / 1990(WL3)
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760R-VL



С широким полем обзора 170°, а также с большим диаметром инструментального канала (3,8 мм) этот колоноскоп просто идеален для повседневной практики. Он отличается новой рукояткой G7 и регулятором гибкости. Кроме того, у него довольно малый диаметр 12,0 мм и он оснащен системой смыва и CMOS элементом.

Видеоколоноскоп EC-760R обеспечивает широкое поле обзора 170°. Даже области, трудные для наблюдения, например обратные стороны складок, легко поддаются визуализации.

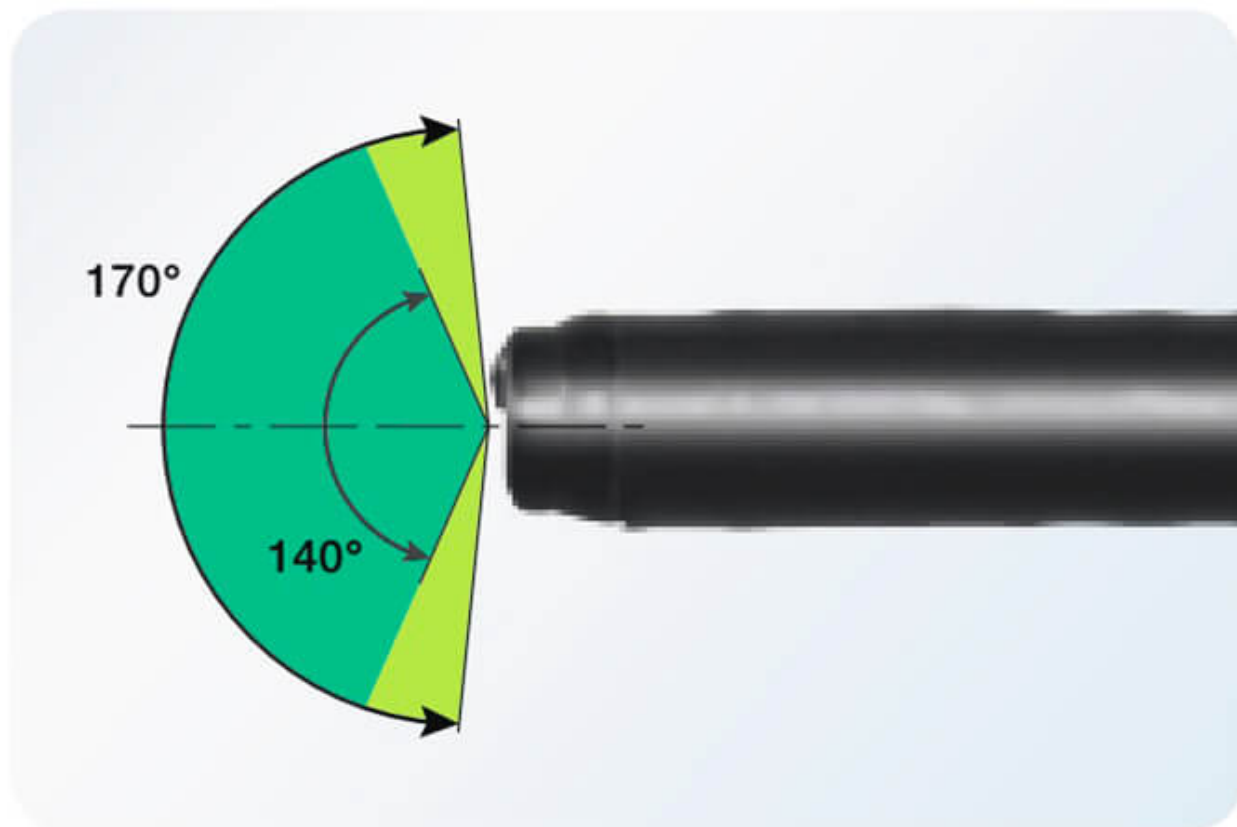

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1690
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,0
Угол зрения	170°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760ZP-VL



Тонкий колоноскоп отличается яркостью изображений и легко управляемой функцией переменной фокусировки с максимальным увеличением 135х. В режиме BLI становятся видимыми тончайшие детали строения слизистых оболочек и сосудов. Подобно обычному эндоскопу, эта модель обладает полным спектром функций, включая регулировку гибкости, даже при диаметре 11,8 мм.


Обновленная технология ColoAssist корпорации Fujifilm была оптимизирована для колоноскопов серии ELUXEO™ 700 и теперь включает в себя регулятор гибкости для более легкого введения эндоскопа в дополнение к улучшенной передаче усилий и адаптивному сгибанию.

COLOASSIST ADJUST

Технология ColoAssist Adjust была специально разработана для колоноскопов серии 700. Она отличается инновационной системой передачи усилий и адаптивного сгибания, а также возможностью настройки различных уровней жесткости для улучшения маневренности эндоскопа и повышения комфорта для пациента. Модели EC-760R и EC-760ZP оснащены системой ColoAssist Adjust.

РЕГУЛЯТОР ГИБКОСТИ

Жесткость управляемой части эндоскопа можно легко регулировать по мере необходимости. Это полезно при введении эндоскопа в такие полости, как сигмовидная кишка и поперечная ободочная кишка, где эта функция обеспечивает эндоскопу более точное соответствие траектории кишечного тракта.

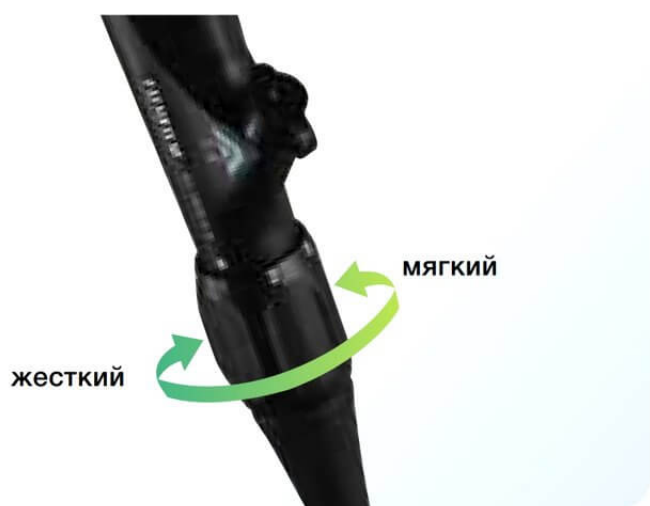


УЛУЧШЕННАЯ ПЕРЕДАЧА УСИЛИЙ

Управляемая часть рассчитана на передачу усилий введения, извлечения и вращения от руки к

дистальному концу эндоскопа, который обеспечивает повышенную маневренность внутри желудочно-кишечного тракта.

При глубоком введении

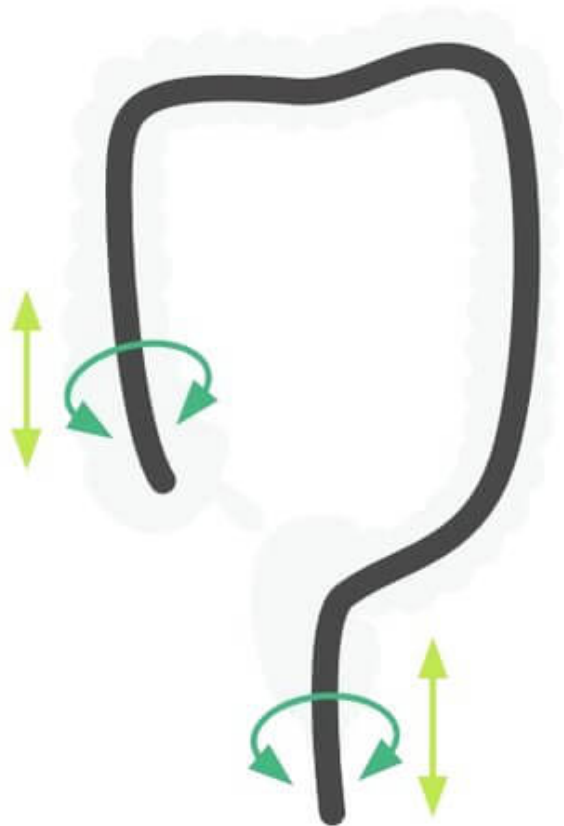

АДАПТИВНОЕ СГИБАНИЕ

Конец управляемой части мягкий, что позволяет эндоскопу продвигаться, следуя изгибам желудочно-кишечного тракта. Гибкая управляемая часть разработана с расчетом на более легкое возвращение к своей прямой форме после прохождения через крутые изгибы толстой кишки.

Без свойства адаптивного сгибания



Со свойством адаптивного сгибания




Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	11,7
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1690
Глубина резкости	Нормально: 3-100, Близко: 1,5-2,5
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,8
Угол зрения	Нормально: 140°, Близко: 56°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760P-VM



Этот ультратонкий колоноскоп из серии ELUXEO™ 700 имеет диаметр дистального конца всего 11,1 мм и поэтому особенно подходит для педиатрического и терапевтического использования. Широкое поле зрения 170 ° обеспечивает визуализацию даже в труднодоступных местах. Он оснащен новой рукояткой G7 и регулятором гибкости для облегчения установки.

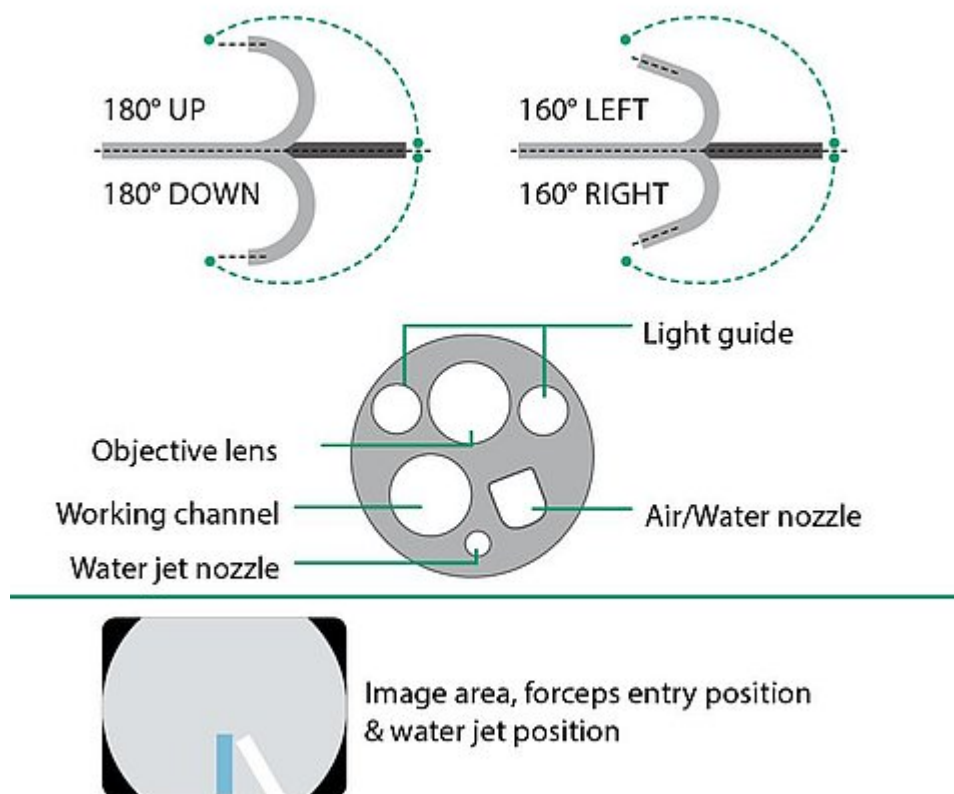

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	11,1
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1330
Общая длина, мм	2010
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,5
Угол зрения	170°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760R-VI




С широким полем обзора 170°, а также с большим диаметром инструментального канала (3,8 мм) этот колоноскоп просто идеален для повседневной практики. Он отличается новой рукояткой G7 и регулятором гибкости. Кроме того, у него довольно малый диаметр 12,0 мм и он оснащен системой смыва и CMOS элементом.

Широкое поле обзора 170°

видеоколоноскопа Fujifilm EC-760R-VI

Видеоколоноскоп EC-760R обеспечивает широкое поле обзора 170°. Даже области, трудные для наблюдения, например обратные стороны складок, легко поддаются визуализации.

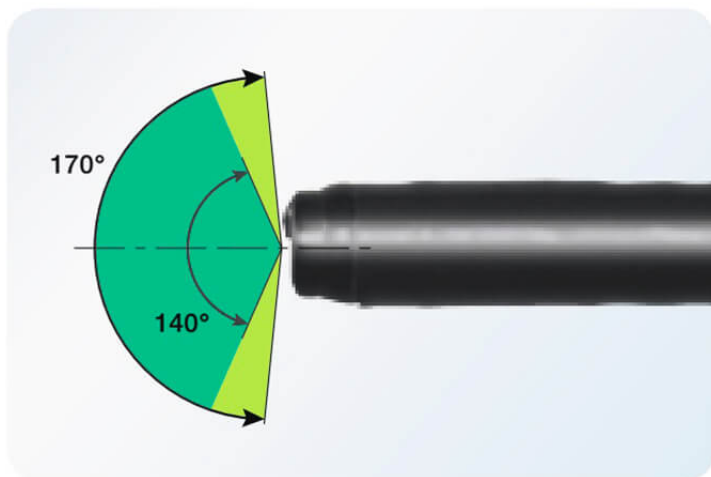

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1520
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,0
Угол зрения	170°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760R-VM




С широким полем обзора 170°, а также с большим диаметром инструментального канала (3,8 мм) этот колоноскоп просто идеален для повседневной практики. Он отличается новой рукояткой G7 и регулятором гибкости. Кроме того, у него довольно малый диаметр 12,0 мм и он оснащен системой смыва и CMOS элементом.

Широкое поле обзора 170°

видеоколоноскопа Fujifilm EC-760R-VM

Видеоколоноскоп EC-760R обеспечивает широкое поле обзора 170°. Даже области, трудные для наблюдения, например обратные стороны складок, легко поддаются визуализации.

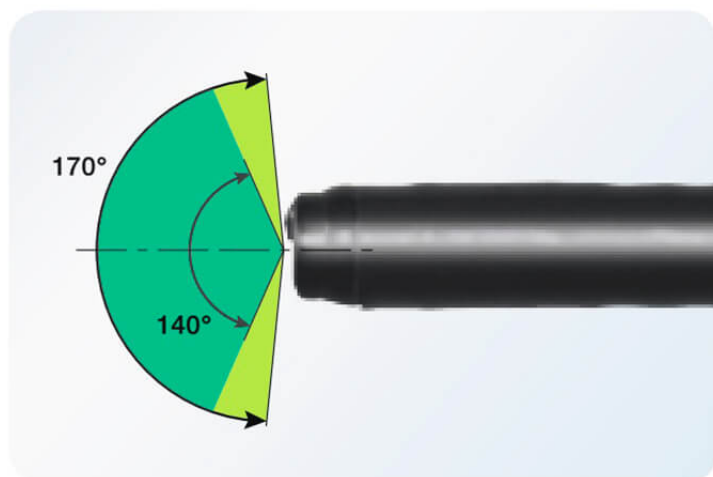

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,0
Угол зрения	170°


Видеоколоноскоп Fujifilm EC-740TL



Этот тонкий колоноскоп оснащен улучшенной передачей усилия, углом наклона 210 ° вверх и рукояткой G7, обеспечивающей отличную маневренность. Он особенно подходит для использования в более сложных анатомических условиях и в педиатрии, где его можно применять в случаях стеноза, сильного воспаления или анатомических спаек. Благодаря дополнительным режимам наблюдения - LCI для улучшенного обнаружения и BLI для характеристики поражений - это отличный колоноскоп как для наблюдения, так и для терапевтических процедур.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1690
Общая длина, мм	2010
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210° / вниз 160°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	10,7
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-600WM

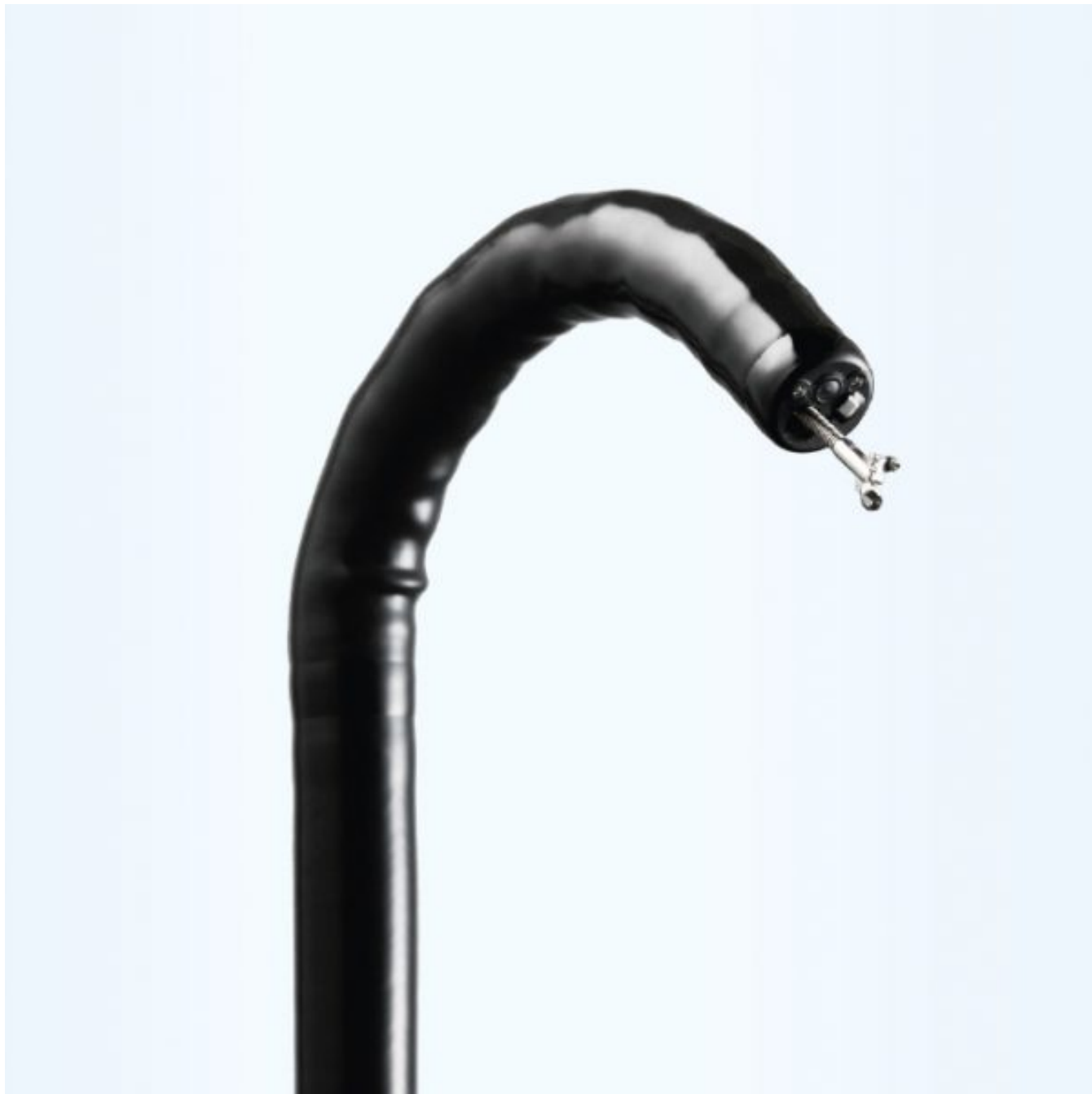

Эндоскопы серии 600 с CMOS матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность диагностики. С системой смыва.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,0
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530WM3



Видеоколоноскоп EC-530WM3 с рабочей длиной 1330 мм и высоким разрешением является удачным решением для эффективного проведения эндоскопических исследований. Подвижность дистального конца вниз/вверх составляет 180 °, влево/вправо – 160 °. Это существенно расширяет возможности обнаружения скрытых образований на стенках толстого кишечника.

Отличительной особенностью модели является оригинальная конструкция вводимого зонда с технологией ColoAssist. Градуированная жесткость гибкой части позволяет осуществлять ее введение без дополнительного ассистирования, предотвращает петлеобразование, значительно повышает комфорт пациента в процессе процедуры.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330
Общая длина, мм	1630
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-530LP



EC-530LP — тонкий видеоэндоскоп для нижних отделов ЖКТ производства корпорации FUJIFILM с CCD-матрицей высокого разрешения.

Применение видеоколоноскопа

- тонкий диаметр вводимой части позволяет применять эндоскоп в педиатрии;
- рутинные эндоскопические процедуры;
- взятие биопсии;
- проведение операций и прочих эндоскопических вмешательств

Преимущества:

- широкий 3,2 мм рабочий канал при сравнительно тонком диаметре вводимой части;
- оборудование произведено непосредственно в Японии;
- обладает высоким пределом прочности и износостойкости;
- наличие гарантийного и возможность постгарантийного технического обслуживания в авторизованном сервисном центре;
- доступность расходных материалов и запасных частей;
- демократичные цены при обращении в авторизованный сервисный центр нашей компании;
- CCD-матрица высокого разрешения;
- Эргономичная рукоять с функциональными кнопками быстрого доступа;
- Облегченное вращение рукояток управления тягами.

Совместимость с видеосистемами

- бюджетный видеопроцессор Fujifilm EPX-2500;
- видеосистемы высокого класса Fujifilm EPX-4450HD, EPX-3500HD;
- видеосистема экспертного класса Fujifilm ELUXEO 7000

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1690
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,0

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-740TM



Этот тонкий колоноскоп оснащен улучшенной передачей усилия, углом наклона 210 ° вверх и рукояткой G7, обеспечивающей отличную маневренность. Он особенно подходит для использования в более сложных анатомических условиях и в педиатрии, где его можно применять в случаях стеноза, сильного воспаления или анатомических спаек. Благодаря дополнительным режимам наблюдения - LCI для улучшенного обнаружения и BLI для

характеристики поражений - это отличный колоноскоп как для наблюдения, так и для терапевтических процедур

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1330
Общая длина, мм	1650
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210° / вниз 160°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	10,7
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-580RD-M



Новая матрица Super CCD и высокоэффективная оптическая система обеспечивают отличное качество изображений. Все эти компоненты в сочетании с технологией FICE, позволяющей получать яркие изображения, способствуют выполнению различных диагностических и лечебных процедур.

- Примечание: Дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1330
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210° / вниз 160°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	10,5
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-600ZW/M



Эндоскопы серии 600 с CMOS матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность диагностики.

- Оптическое увеличение,


- Дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330
Глубина резкости	Нормально: 3-100, Близко: 1,5-2,5
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Угол зрения	Нормально: 140°, Близко: 56°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-720RI



Видеоколоноскоп из новой серии Eluxeo Lite для рутинных процедур.

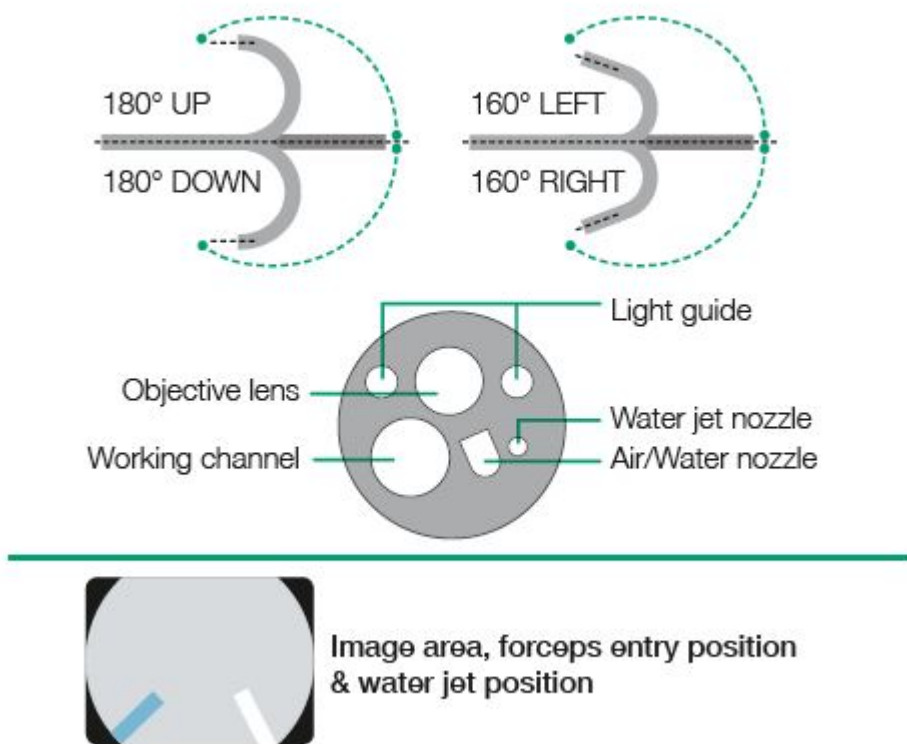

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1520
Общая длина, мм	1820
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Угол зрения	170°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-580RD-L



Новая матрица Super CCD и высокоэффективная оптическая система обеспечивают отличное качество изображений. Все эти компоненты в сочетании с технологией FICE, позволяющей получать яркие изображения, способствуют выполнению различных диагностических и лечебных процедур.


- Примечание: Дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1690
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210° / вниз 160°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	10,5
Угол зрения	140°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-760P-VL



Этот ультратонкий колоноскоп из серии ELUXEO™ 700 имеет диаметр дистального конца всего 11,1 мм и поэтому особенно подходит для педиатрического и терапевтического использования. Широкое поле зрения 170 ° обеспечивает визуализацию даже в труднодоступных местах. Он оснащен новой рукояткой G7 и регулятором гибкости для облегчения установки.

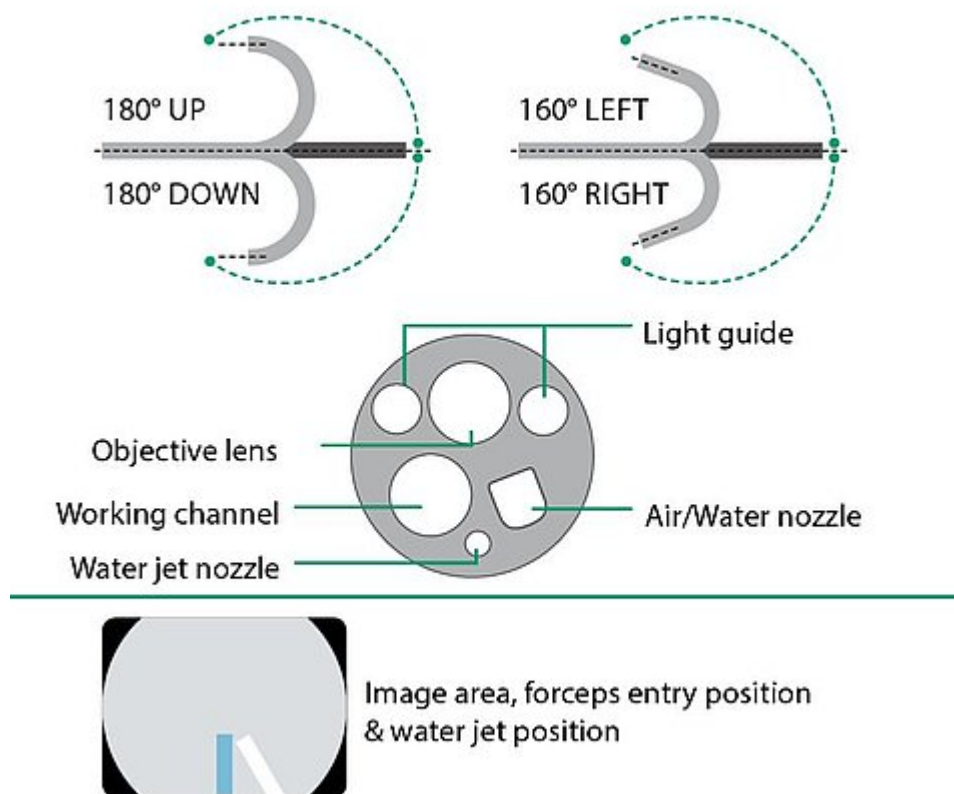

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	11,1
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1690
Общая длина, мм	2010
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,5
Угол зрения	170°

Фиброколоноскоп Fujifilm FC-1Z



Преимущества:

- Фиброскоп позволяет полностью контролировать дистальную часть в процессе проведения процедур, чему способствует изгиб с малым радиусом и способности производить наклон в любом направлении.

- Применение в новых эндоскопах простого и легкого окуляра позволило получить оптимальную конструкцию, которая хорошо сбалансирована, что дало возможность снизить дискомфорт пациента и существенно облегчить труд врача.
- Оптоволокну, трубки, шестерни, провода и другие части устройства прошли тщательную процедуру тестирования как в лабораторных условиях, так и реальной практике. Фиброскопы собираются с высокой степенью точности на собственных производственных предприятиях компании командой инженеров высокого профессионального уровня.
- Оптимальная гибкость фиброскопа обеспечивает более легкое проведение процедур, делает работу специалиста более эффективной, а исследование не столь неприятным для пациентов.
- Оптоволокну новой конструкции обеспечивает крупное и четкое изображение, что даёт улучшение скоростных характеристик и эффективности, проводимых исследований.
- Устройство имеет достаточную рабочую длину, которая составляет 1660 мм для модели FC-1Z и 1330 мм для модели FC-1ZM. Колонофиброскоп является полностью водонепроницаемым.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	13,0
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1660
Общая длина, мм	1980
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	120°

Видеоколоноскоп двухканальный Fujifilm EC-530DL



EC-530DL — видеоколоноскоп для нижних отделов ЖКТ производства корпорации FUJIFILM, имеющий 2 инструментальных канала при стандартном диаметре вводимой части, равном 12,8 мм. Наличие двух каналов позволяет одновременно использовать 2 эндоскопических инструмента, что повышает возможности врача при проведении сложных эндоскопических операций.

Применение видеоколоноскопа:

- проведение операций и прочих эндоскопических вмешательств;
- эндоскопические исследования, взятие биопсии

Преимущества:

- наличие двух широких каналов для использования инструмента;
- наличие системы смыва Water Jet;
- оборудование произведено непосредственно в Японии;
- обладает высоким пределом прочности и износостойкости;
- наличие гарантийного и возможность постгарантийного технического обслуживания в авторизованном сервисном центре;
- доступность расходных материалов и запасных частей;
- демократичные цены при обращении в авторизованный сервисный центр нашей компании;
- CCD-матрица высокого разрешения;
- эргономичная рукоять с функциональными кнопками быстрого доступа;
- облегченное вращение рукояток управления тягами;
- технология легкого введения ColoAssist.

Совместимость с видеосистемами:


- бюджетный видеопроцессор Fujifilm EPX-2500;
- видеосистема высокого класса Fujifilm EPX-4450HD, EPX-3500HD;
- видеосистема экспертного класса Fujifilm ELUXEO 7000

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,8 / 3,8
Рабочая длина, мм	1690
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-720RL



Видеоколоноскоп из новой серии Eluxeo Lite для рутинных процедур.

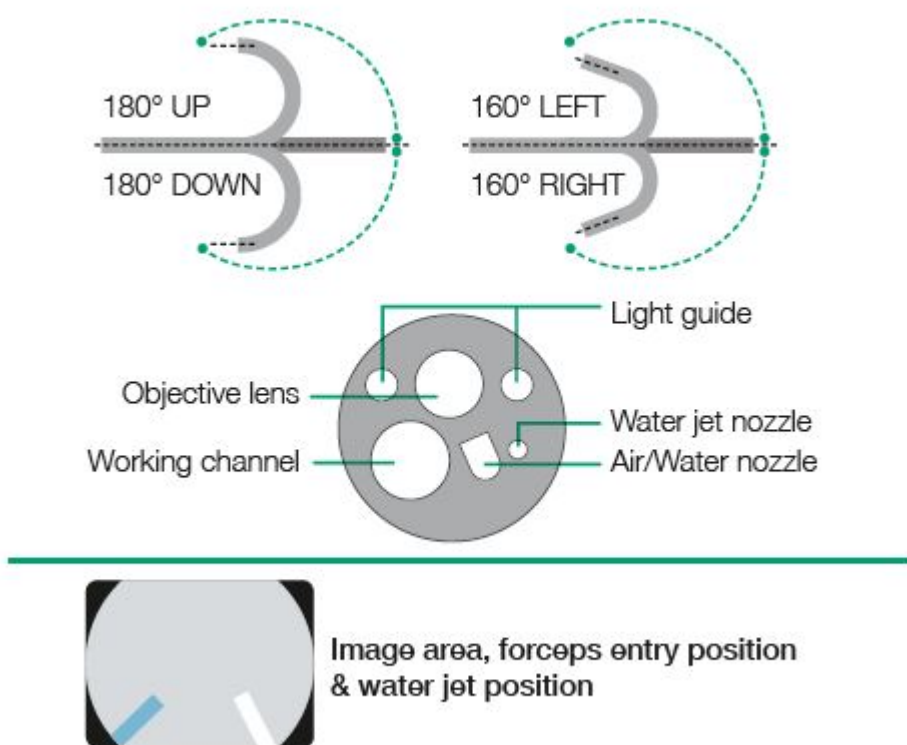

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1690
Общая длина, мм	1990
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Угол зрения	170°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-600ZW/L



Эндоскопы серии 600 с CMOS матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность диагностики.

- Оптическое увеличение,


- Дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1690
Глубина резкости	Нормально: 3-100, Близко: 1,5-2,5
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Угол зрения	Нормально: 140°, Близко: 56°

Видеоколоноскоп Fujifilm EC-720RM



Видеоколоноскоп из новой серии Eluxeo Lite для рутинных процедур.

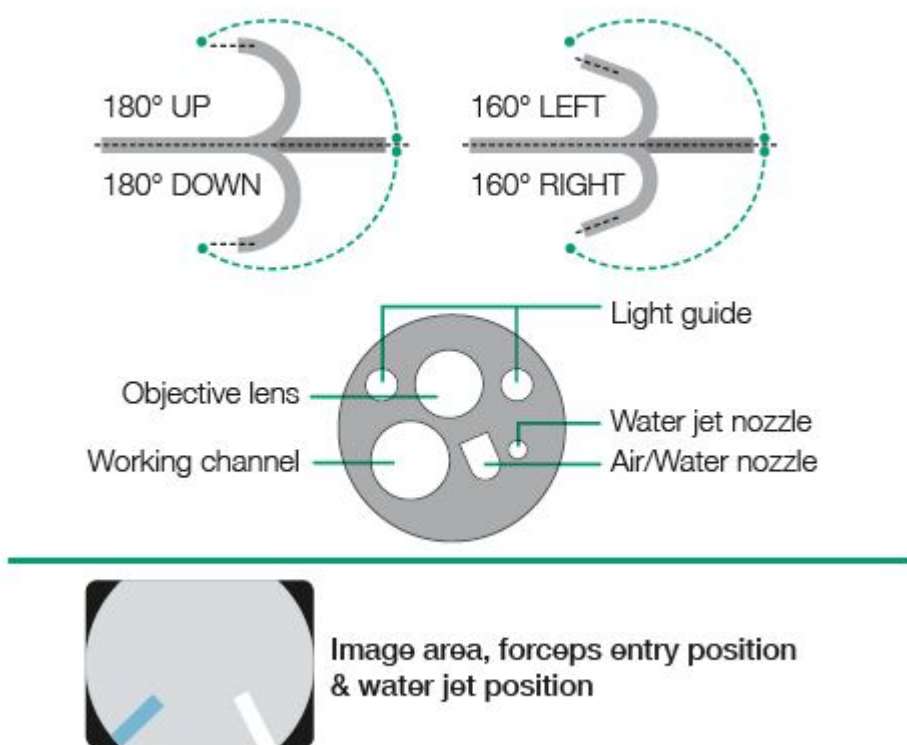

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Колоноскопы
Диаметр дистального конца, мм	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1330
Общая длина, мм	1630
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 180° / вниз 180°; вправо 160°/ влево 160°
Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Угол зрения	170°

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	